



130 - 180 см
до 80 кг

Тест DEKRA (Реабилитация - "S")

включая тестирование всех
реабилитационных аксессуаров
В СООТВЕТСТВИИ С

P129

HERCULES PRIME

P129

Модульное реабилитационное автокресло, которое растёт
с пользователем в течение очень долгого времени


Thomashilfen

Thomashilfen

HERCULES PRIME

” Необходимо надёжное решение для детей, молодёжи и взрослых с физическими и неврологическими нарушениями, чтобы они всегда были в безопасности в автомобиле.


HERCULES PRIME отлично подходит для случаев, когда реабилитационные автокресла становятся слишком малы или требуется дополнительная поддержка в автомобиле. Модульное кресло с регулируемым положением, которое растёт вместе с пользователем, предлагает привычные функции реабилитационного автокресла и может быть индивидуально адаптировано благодаря широкому выбору аксессуаров, которые также растут вместе с пользователем. Когда требуется дополнительная поддержка головы и верхней части тела, простой системы ремней безопасности в автомобиле недостаточно. Для удобного и безопасного положения сидя в каждой поездке. “



Всегда
рекомендуется для
всех диагнозов, которые
включают ограниченный
контроль туловища



Компания Thomashilfen уже более 30 лет предоставляет реабилитационные автокресла детям с особыми потребностями. Сегодня мы также используем наши знания и опыт для разработки собственных реабилитационных автокресел для детей и взрослых. Они воплощают в себе весь наш многолетний опыт в области удовлетворения потребностей пользователей и их родственников.

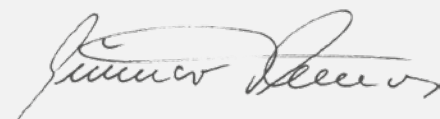
Гуннар Томас, владелец



Теперь с
плечевыми
поддержками и
новым подголовником

Успешный
в Европе и
Северная
Америка



Рис. включая аксессуары

- ▶ До 180 см
- ▶ До 80 кг
- ▶ Защита от бокового удара
- ▶ Очень маленький складной
- ▶ Быстро и легко настраивается
- ▶ Быстрая, бесступенчатая регулировка угла наклона спинки



ВЫСОТА СПИНКИ

Благодаря плавной регулировке высоты спинки на 25 см её можно в любой момент подстроить под рост пользователя.

Голова поддерживается в оптимальном положении.

Большой выбор аксессуаров, который растёт вместе с пользователем, обеспечивает длительный срок службы.





НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕМНЯ

Для 3-точечного ремня безопасности транспортного средства можно использовать как справа, так и слева. Направляющую можно закрепить быстро и легко.



БОКОВЫЕ ПОДДЕРЖКИ

Для поддержки и позиционирования верхней части тела доступны дополнительные аксессуары, которые растут вместе с пользователем.



НАКЛАДКА НА ПАХ

Снижает давление пряжки ремня на чувствительной области живота и скрывает пряжку ремня.



ПРЯЖКА ДЛЯ РЕМНЯ

Плечевые ремни можно отдельно пристегнуть к быстроразъёмной застёжке, что облегчает застегивание для опекунов.



5-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Мягкие наплечники обеспечивают дополнительную поддержку и удобное положение сидя во время поездки – нужная длина ремня быстро регулируется двумя пряжками.




ОБИВКА

Плотная обивка для комфортного сидения без раздражающего потения, дышащий чехол можно полностью снять и постирать при температуре 40°C.



ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ

Плавная регулировка на 8 см, индивидуальная адаптация к рост пользователя.

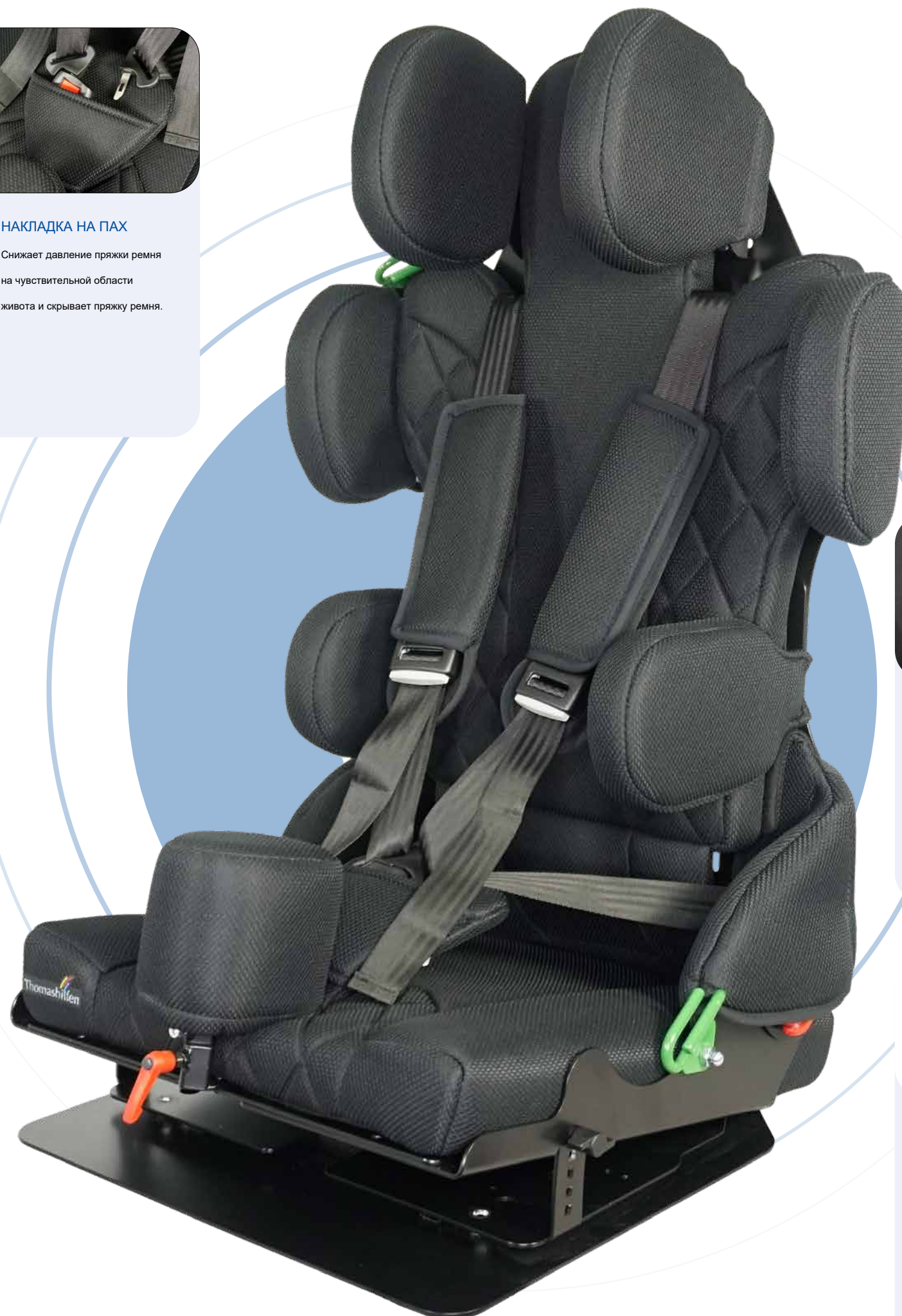

ЗАЩИТА ОТ БОКОВОГО УДАРА

Поглощает энергию в случае боковых столкновений



УГОЛ НАКЛОНА СПИНКИ

Можно отрегулировать спинку двумя быстрыми движениями — инструменты не требуются, просто используйте красный рычаг быстрого отсоединения



ПОДГОЛОВНИК

Для правильного расположения головы и надёжной фиксации



ВЫСОТА СПИНКИ

Можно регулировать бесконечно, поэтому сиденье адаптируется к пользователю и обеспечивает длительное время работы



ПОДУШКА СИДЕНЬЯ

Широкое сиденье (38 см) подходит для крупных пользователей и облегчает посадку и высадку. Пересадка для родителей также упрощена и не нагружает спину

АКСЕССУАРЫ индивидуальные, удобные и развивающиеся вместе с пользователем

► Функциональные базы



ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА

Облегчает пересадку, сиденье для позиционирования можно повернуть влево или вправо

Для удобства перемещения более тяжёлых пациентов с особыми потребностями функция поворота сиденья существенно облегчает нагрузку на спину ухаживающего за ними человека. Поворот сиденья можно менять слева направо. Кнопка разблокировки расположена в передней части, что обеспечивает лёгкость разблокировки



ФУНКЦИЯ НАКЛОНА

Позволяет наклонять сиденье в несколько ступеней для удобного положения отдыха во время вождения

В случаях слабого контроля верхней части тела и головы (гипотонического, «вялого») регулируемый наклон сиденья в пространстве является важной поддержкой для предотвращения «опрокидывания вперёд». Пользователь сидит в расслабленном положении отдыха и не должен прилагать усилий для удержания. Соответствующий угол наклона можно отрегулировать по мере необходимости.

► Устойчивость реабилитационного автокресла



SEATFIX (за сиденьем)

Надёжно удерживает сиденье на месте во время поездки



ЗАЖИМНАЯ ДУГА

Обеспечивает надёжную фиксацию сиденья на месте, когда отсутствует крепление Isofix



СТАБИЛИЗАЦИЯ СПЕРЕДИ

Гарантирует надёжную фиксацию сиденья в области ног

Особенно при использовании функций поворота и наклона, кресло-позиционер подвергается дополнительной нагрузке при ежедневном использовании. Для стабилизации кресла-позиционера в автомобиле следует использовать специальные аксессуары — это обеспечит удобство использования и большую безопасность для пользователей и лиц, осуществляющих уход.

► Надёжная поддержка головы и ног



ПОДГОЛОВНИК

Для правильного расположения головы и надёжной фиксации



ВТОРАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕМНЯ

Как удобный вариант использования 3-точечного ремня безопасности как с правой, так и с левой стороны



ПОДНОЖКА (складная)

Помогает садиться и вставать с сиденья и предотвращает соскальзывание с сиденья (регулируется по высоте и углу наклона)

► Точно регулируемый комфорт сиденья и оптимальная поддержка для индивидуальных потребностей



БОКОВЫЕ ПОДДЕРЖКИ, УЗКИЕ

Обеспечивают надёжную боковую поддержку и поддерживают грудную клетку



БОКОВЫЕ ПОДДЕРЖКИ, ОТКИДНЫЕ, УЗКИЕ

Обеспечить надёжную боковую поддержку грудной клетки и облегчить перемещение



БОКОВЫЕ ПОДДЕРЖКИ, ШИРОКИЕ

Обеспечивают надёжную боковую поддержку на большой площади и поддерживают верхнюю часть тела



БОКОВЫЕ ПОДДЕРЖКИ, ОТКИДНЫЕ, ШИРОКИЕ

Обеспечивают надёжную боковую поддержку на большой площади верхней части тела и облегчают перемещение



АБДУКТОР

Улучшает направление ног и предотвращает их перекрещивание



БОКОВЫЕ ПОДДЕРЖКИ КОЛЕН

Поддерживать устойчивое положение сидя, а также обеспечивать необходимую поддержку бёдер



ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ СИДЕНЬЯ

Надевается на подушку сиденья. Защищает чехол от влаги, благодаря чему он дольше остаётся чистым.

► Пользователь и транспортное средство надёжно защищены



ПЕРЕДНЯЯ ОБЛОЖКА

Защищает ноги и предотвращает натирание о пластину глубины сиденья



СОЕДИНИТЕЛЬ НАГРУДНЫХ РЕМНЕЙ

Предотвращает опасное перекручивание ремней и гарантирует, что ремни останавливаются на месте



ПОДУШКА ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ

Обеспечивает максимальную поверхность контакта между сиденьем автомобиля и основанием для удобства переноса



КОВРИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Защищает сиденье автомобиля и имеет 3 практичных кармана для мелких предметов спереди



В ПОВСЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Отрегулируйте положение сиденья в автомобиле. При максимальном положении спинки расстояние между макушкой и крышей автомобиля должно составлять не менее 5 см, чтобы обеспечить комфортное положение для высоких пользователей.

БОЛЬШОЙ СТАНОВИТСЯ МАЛЕНЬКИМ И УДОБНЫМ

Большое сиденье с регулируемой высотой легко складывается до компактного и удобного размера всего за несколько простых движений. Это не только облегчает установку в автомобиле, но и позволяет легко перевозить сиденье в малолитражных автомобилях, а также убирать его для экономии места.



ВСЕГО 55 x 21 x 60 см

Размеры и вес

Hercules Prime

Глубина сиденья	40 – 48 см
Ширина сиденья	38 см
Высота спинки (сидите внутри)	55 – 80 см
Ширина спины (сиденье)	45 см
Высота плеча (направляющая ремня)	38 – 60 см
ширина плеч (с плечевым направляющим)	45 см
Угол наклона спины (макс.)	135°
Наклон сиденья в пространстве (базовая модель)	0°
(с наклонным основанием 10°)	0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10° / 10° /
(с наклонным основанием 20°)	12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Длина голени (с подставкой для ног)	17 – 43 см
Высота боковых опор ствола (верхний край)	20 – 45 см
Расстояние боковых опор туловища (макс.)	41 см
Макс. габаритные размеры (ШхВхД)	52 x 88 x 43 см
Мин. размеры в сложенном виде (ШхВхД)	55 x 21 x 60 см
Вес сиденья (базовая модель)	12,3 кг
Пользователь с указанием роста	130 – 180 см
Макс. вес пользователя	80 кг

Стандартные функции:

Защита от бокового удара; спинка со встроенной регулировкой высоты; сиденье со встроенной регулировкой глубины сиденья; плавная регулировка угла наклона спинки с помощью быстросъемного рычага; дышащая обивка с огнестойкой тканью; подушка для головы; подушка для спины; подушка для таза; подушка для сиденья; накладка на пах; 5-точечный ремень с наплечниками; направляющая для 3-точечного ремня безопасности автомобиля (можно использовать справа или слева); подготовленные варианты крепления для всех аксессуаров; съемные чехлы; можно стирать в стиральной машине при температуре до 40 °C



Посмотрите видео:
Как быстро и легко установить
Hercules Prime в вашем автомобиле



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Германия
Телефон: +49 (0)4761 886-63 или -68 · Факс: +49 (0)4761 886-19 · www.thomashilfen.com