

50
YEARS

Thomashilfen

PIONEER
SINCE 1969

Протестировано в
соответствии с новыми
стандартами
безопасности R129

—

защита от бокового удара
включена!



до 50 кг

100 – 150 см

Hercules Small

Отправляйтесь на дороги сегодня,
думая о безопасности завтрашнего дня!


Thomashilfen

THOMASHILFEN

Hercules Small



«Всегда на шаг впереди в вопросах безопасности»

Мы рады представить новое реабилитационное автокресло Hercules Small — лидера в области безопасности детей во время путешествий!


Это специально разработанное реабилитационное автокресло, которое соответствует действующим стандартам безопасности. Hercules Small, протестированное в соответствии с новейшими стандартами **R129**, который учитывает **лобовые и боковые удары**, обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективную защиту вашего ребёнка.

Но Hercules Small — это **больше, чем просто обычное автокресло**. Мы оснастили его такими важными дополнительными функциями, как защита от боковых ударов, опоры для таза и ног, а также подголовник. Каждый из этих элементов играет ключевую роль в соблюдении строгих стандартов безопасности, обеспечивая комфорт и поддержку вашего ребёнка. Никогда ещё не было более надёжного способа обеспечить комфорт!



Стандарт автокресла R129 уделяет особое внимание усиленной защите при боковом ударе и предъявляет повышенные требования к системе ремней безопасности и креплению детского сиденья в автомобиле. Помимо безопасности при столкновении, другие аспекты, такие как удобство использования, эргономика и использование материалов с низким содержанием загрязняющих веществ, также подвергаются строгим испытаниям.

С совершенно новыми ФУНКЦИЯМИ

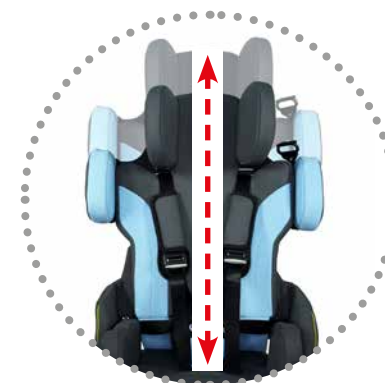

ВЫСОТА СПИНКИ

Спинку можно плавно регулировать по высоте в диапазоне 24 см, что позволяет в любой момент подстроить ее под рост ребенка.

Голова удерживается в оптимальном положении благодаря плавно и асинхронно регулируемому подголовнику.

Большой выбор аксессуаров, расширяющихся вместе с изделием, обеспечивает долгий срок его службы.





НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ НОГ

Ширина сиденья от 29 до 38 см. Сидите с хорошей поддержкой в любое время. Тазовые и ножные направляющие, которые растут вместе с пациентом, бесступенчатые и регулируются индивидуально для каждой стороны, также асинхронно.



Уже более 30 лет компания Thomashilfen поставляет автокресла для детей с особыми потребностями. Сегодня мы также используем наши ноу-хау для разработки собственных автокресел для детей и взрослых. В них вложен весь наш многолетний опыт работы с потребностями пользователей и их родственников.

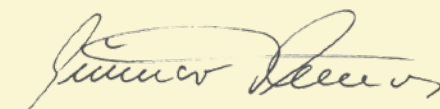
Гуннар Томас, Инхабер

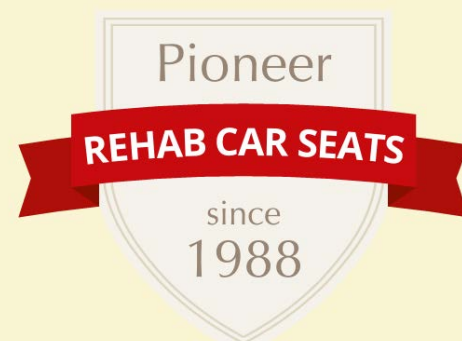

ЗАЩИТА ОТ БОКОВЫХ УДАРОВ

Обеспечивают особенно хорошую защиту от боковых ударов — они наилучшим образом поглощают силы, особенно в области головы и плеч. **Протестировано в соответствии с последним стандартом безопасности (R129).**



ЭКСКУРСИЯ ПО ПЕРВОКЛАССНЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЯМ



Защита от боковых ударов

Обеспечивают особенно хорошую защиту от боковых ударов — они наилучшим образом поглощают силы, особенно в области головы и плеч. **Протестировано в соответствии с последним стандартом безопасности (R129)**



5-точечные ремни безопасности

Оснащен мягкими плечевыми накладками для дополнительной поддержки и удобного и безопасного положения сиденья во время езды — нужная длина ремня быстро регулируется с помощью двух пряжек.

Пряжка для ремня

Плечевые ремни можно застегнуть по отдельности с помощью быстроразъемной пряжки, что означает простое крепление для родителя или сопровождающего.



Накладка на пряжку ремня

Уменьшает давление пряжки ремня на чувствительную область живота и скрывает пряжку ремня.



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ НОГ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)

Используются для поддержки и позиционирования в области бёдер. Их можно регулировать асинхронно.


ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ

Плавная регулировка в диапазоне 6 см для индивидуальной адаптации к росту ребёнка.



ПОДГОЛОВНИК

Асинхронно регулируется по ширине (8,5 см) и высоте (3 см). С помощью отдельных аксессуаров регулируется также и глубина, что позволяет избежать перегрузки.

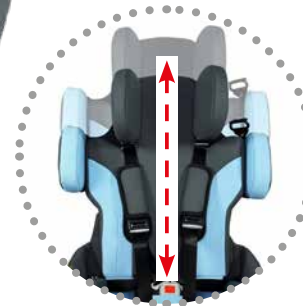

ВЫСОТА СПИНКИ

Можно регулировать непрерывно (24 см). Таким образом, сиденье подстраивается под ребёнка и обеспечивает длительное время подачи.



АКСЕССУАРЫ: ЗАДНИЙ УГОЛ

Можно плавно регулировать по наклону спинки с помощью двух быстрых ручек — без каких-либо инструментов: просто используйте красное быстроразъемное крепление зажимов

ПОДУШКА СИДЕНЬЯ

С плотной подкладкой для комфортного сидения без раздражающего потоотделения. Дышащий чехол можно полностью снять и постирать при температуре 40 °C, не ослабляя ремни.



Выбор из 2 цветовых решений:




синий красный

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: НАШИ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАШЕГО HERCULES SMALL

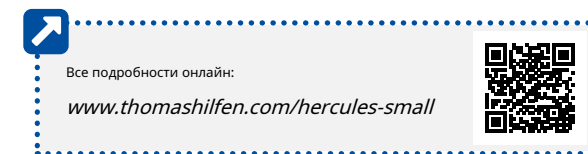

Функциональные базы



ТРИГГЕР (рис. ниже)

Облегчает пересадку, сиденье можно повернуть влево или вправо (опционально). Имеется рычаг поворота (рис. выше).

Чтобы справиться с перемещением постоянно растущего ребёнка, поворотный механизм. Пластина – настоящее облегчение для спины. Спусковой механизм расположен спереди, что обеспечивает комфортный сброс.



ФУНКЦИЯ НАКЛОНА

Для наклона сиденья в несколько положений для комфортного отдыха во время движения (0 - 10° или с выдвижением 12,5 - 20°).

В случаях слабого контроля верхней части тела и головы регулируемый наклон сиденья является важной опорой для предотвращения «опрокидывания вперед». Ребенок сидит в расслабленной позе, и ему не нужно прилагать никаких усилий для удержания. При необходимости можно отрегулировать соответствующий угол наклона.

Устойчивость реабилитационного автокресла



SEATFIX (за сиденьем)

Надёжно удерживает сиденье на месте, даже при «пустом» вождении без ребёнка в кресле.



СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ЛУК

Обеспечивает надёжную фиксацию сиденья при отсутствии в автомобиле креплений Isofix.

Сиденье подвергается дополнительным нагрузкам, особенно при ежедневном использовании функций поворота и наклона. Для стабилизации сиденья в автомобиле следует использовать полезные аксессуары - для лучшей управляемости и большей безопасности пользователя и воспитателя.

Надёжная поддержка головы и ног



ВТОРАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕМНЯ (вершина)

Как удобный вариант использования 3-точечного ремня безопасности как справа, так и слева.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА (боковое)

Защищает ребёнка от сенсорной перегрузки во время поездки на автомобиле.



ПОДНОЖКА (складная)

Облегчает посадку и высадку и предотвращает соскальзывание с сиденья (регулируется высота и угол наклона)



КРАШТЕСТ для доказательства прочности, успешно пройденного в соответствии с R129.

Хорошее положение сиденья



БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТУЛОВИЩА (фикс.)

Предоставляет прочную боковую поддержку и поддержку грудной клетки



БОКОВЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТУЛОВИЩА (откидные)

Обеспечивают надёжную боковую поддержку грудной клетки и облегчают перемещение



НАПЛЕЧНИКИ

Уменьшает ширину плеч



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ (высота головы)

Обеспечивает большую площадь, на которую может опираться голова ребёнка.



ПОДЛОКОТНИКИ

Обеспечивают хорошую поддержку предплечий



СТОП

Способствует правильному положению ребёнка и обеспечивает ему всестороннюю защиту. Дополнительная безопасность (может использоваться только с подлокотниками).



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА ПОДУШКА

Обеспечивает ещё более мягкую поверхность контакта с головкой. Наполнитель для каждой камеры (центральной и обеих боковых) можно снять.



АБДУКТОР

Улучшает контроль ног и предотвращает их скрещивание.

Пользователь и транспортное средство надёжно защищены



НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕМНЯ (просто и всегда правильно)

Интуитивно понятное и безопасное крепление трёхточечным ремнём безопасности. Прорезывание или перекручивание ремня исключено. Протестировано на краш-тест!



ЗАЖИМ ДЛЯ ГРУДНОЙ КЛИПСЫ

Предотвращает опасное перекручивание ремней и удерживает их в нужном положении.



ПОДУШКА

Обеспечивает максимальную опорную поверхность между автомобильным сиденьем и функциональным основанием для облегчения перемещения

Полный обзор аксессуаров можно найти в бланке заказа в Интернете:
www.thomashilfen.com



БОЛЬШОЙ СТАНОВИТСЯ УДОБНЫМ



ВСЕГО 55 x 23 x 60 см

Всего несколькими движениями новый Автокресло Hercules Small складывается в компактное и удобное в обращении автокресло. Это не только упрощает сборку в автомобиле, но и обеспечивает лёгкую транспортировку и компактное хранение сиденья даже при ограниченном объёме багажника (примерный рисунок: VW Polo).



You Tube

Посмотрите видео:
Так быстро и легко Hercules Small
устанавливается в автомобиль

Размеры и вес

Геркулес Малый

Глубина сиденья	31–42 см
Ширина сиденья	29 - 38 см
Высота спинки (сидите внутри)	57 - 80 см
Высота головы (сиденье - нижний край подушки)	33,5 - 36,5 см
Макс. ширина спины	57–60 см
Высота плеча (направляющая ремня)	33 - 60 см
Ширина плеч (с плечевым направляющим)	26 - 36,5 см
Угол наклона спинки (макс.)	90° - 145°
Наклон сиденья в пространстве (базовая модель)	0°
(с наклонным основанием 10°)	0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10° / 12,5° /
(с наклонным основанием 20°)	15° / 17,5° / 20°
Длина голени (с подставкой для ног)	16–42 см
Высота боковых опор туловища (верхний край)	28 - 34 см
Расстояние боковых опор туловища (макс.)	20–33 см
Макс. габаритные размеры (шхвхд)	55 x 85 x 34 см
Мин. размеры в сложенном виде (шхвхд)	55 x 23 x 60 см
Вес сиденья (базовая модель)	11,6 кг
Пользователь размера тела	100 - 150 см
Макс. вес пользователя	50 кг

Стандартные функции:

Спинка со встроенной регулировкой высоты; сиденье со встроенной регулировкой глубины и ширины сиденья; плавная регулировка угла наклона спинки с помощью быстросъёмного рычага; дышащая обивка с огнестойкой тканью: подушка подголовника, подушка спины, подушка для таза, направляющая для ног, подушка сиденья, накладка на пах; 5-точечный ремень с мягкими накладками; направляющая для 3-точечного ремня безопасности автомобиля (можно использовать справа или слева); защита от боковых ударов; подготовленные варианты крепления для всех аксессуаров; съёмные чехлы, можно стирать в стиральной машине при температуре до 40 °С.

GMFCS

Уровень
III-V


Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Германия
Телефон: +49 (0)4761 886-63 или -68 · Факс: +49 (0)4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com

Код товара: 980095750000; Статус: 2023-06