

AXKID ONE 3 REHA

Функции (Выбор)



Быстрая и безопасная установка за 30 секунд — просто защёлкните сиденье в креплениях ISOFIX автомобиля, разложите основание подставки и зафиксируйте автоматический амортизатор. Готово!

Боковые накладки на спинке можно точно прикрепить липучками к большой велюровой обивке для лучшей поддержки верхней части тела.

Подголовник, который растёт вместе с ребёнком, регулируется по высоте в 12 положениях сзади.

Центральное колесо для регулировки угла наклона сиденья до 42 градусов, идеально подходит для различных занятий, таких как игра, отдых или сон.

Функции



Съёмная абдукция для правильного положения сидя, предотвращает переворачивание ног

Защита от бокового удара (ASIP) поглощает энергию при боковых столкновениях. Легко устанавливается как с правой, так и с левой стороны.

Технология подвижного сиденья и система Sleep Well позволяют легко отрегулировать сиденье в соответствии с потребностями ребёнка.

Магнитный держатель ремня обеспечивает лёгкость надевания и удобное крепление.

Аксессуары



ПРОТИВОПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ЖИЛЕТ не дает ребёнку выскользнуть из ремня

Защитный коврик для автомобильного сиденья со спинкой, защищающей подушку сиденья, и тремя практичными отделениями спереди для игрушек или подобных вещей

AXKID ONE 3 REHA



Единственное детское кресло Reha ISOFIX, которое обращено назад

Размеры и вес	Axkid ONE 3 Reha
Глубина сиденья (к паховому ремню)	16 см
Глубина сиденья (к переднему краю)	28 см
Ширина сиденья	21 - 29 см
Высота вершины	52 - 63 см
Высота спинки	30 - 41 см
Высота плеча (с направляющей для ремня)	26 - 37 см
Наклон сиденья (базовая модель)	45° / 65°
Габаритные размеры (шхвхд)	44 x 76 x 54 см
Вес сиденья (базовая модель)	9,9 кг
Рост пользователя	61 - 125 см
Макс. вес пользователя	23 кг

Вмешательство в международную организацию детского сада для детей и подростков

KINDER REHA 24
Eine Initiative von Thomashilfen

GMFCS
Уровень II-V




YouTube
Посмотрите видео: Как установить Axkid ONE 3 Reha в машине

Нажмите здесь, чтобы увидеть наиболее часто задаваемые вопросы:
www.thomashilfen.com/axkid-one-3-reha#faq



Протестировано в соответствии с новыми стандартами безопасности R129 – защита от бокового удара включена!

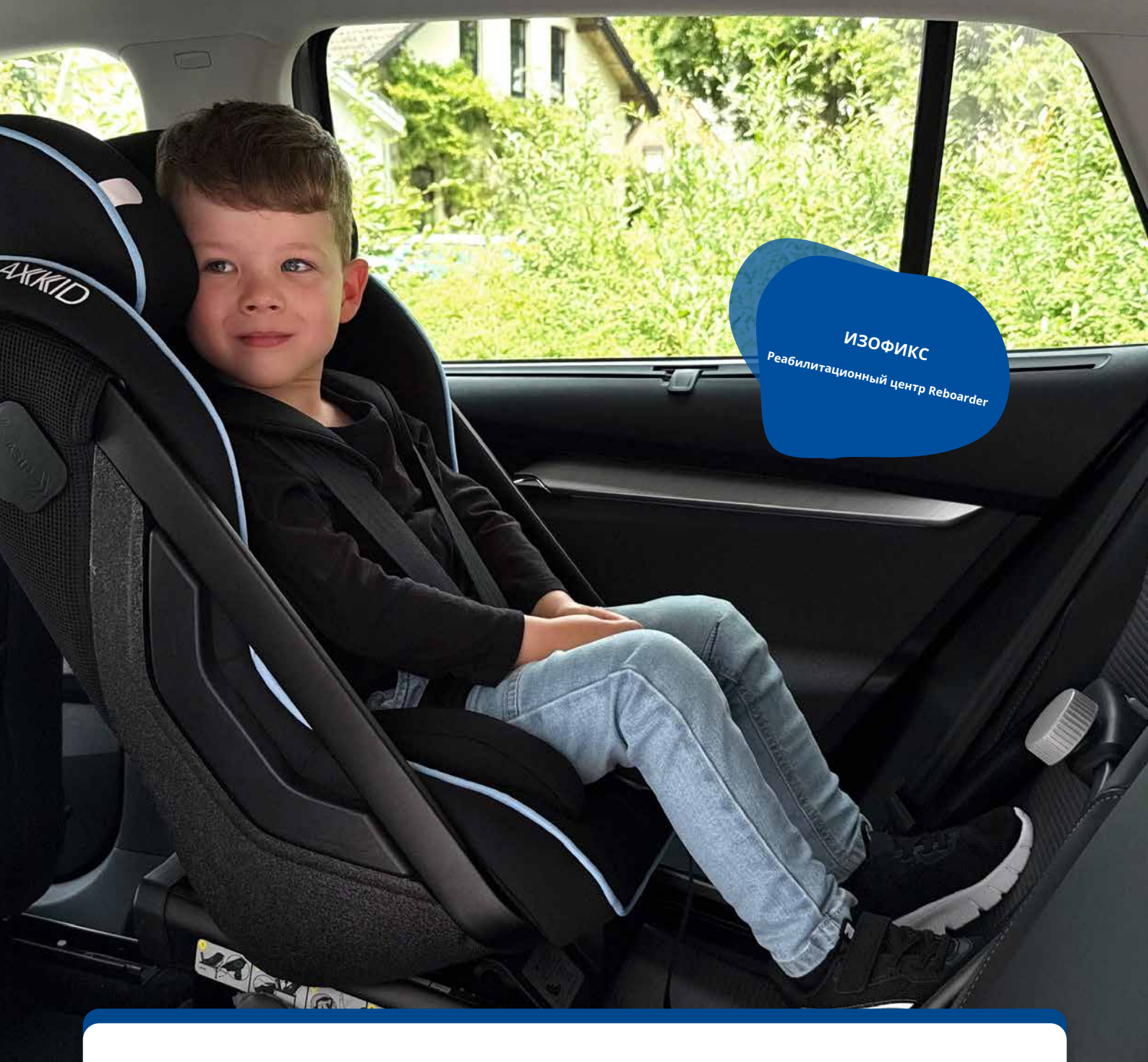

AXKID ONE 3 REHA

Безопасное движение задним ходом для детей ростом до 125 см.
Быстрая установка всего за 30 секунд.

Thomashilfen
Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Бремерфёрде
Телефон +49 (0)4761 8860 · Факс: +49 (0)4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com

Thomashilfen

Код товара: 9800953030000; Статус: 2025-07

Thomashilfen

Axkid ONE 3 Reha

„Axkid ONE 3 Reha - это ультрасовременное детское кресло с системой ISOFIX, которое позволяет детям с ограниченными возможностями сидеть задом наперед на расстоянии до 125 см.

Благодаря своей инновационной технологии он особенно защищает чувствительную голову и шею ребёнка, обеспечивая быструю и безопасную установку всего за 30 секунд – без использования сложных ремней безопасности, что позволяет избежать опасных ошибок при применении, таких как неправильная прокладка ремней, перекрученные ремня или ремни, которые не подходят должным образом, особенно при смене транспортного средства.

Это устанавливает новый стандарт для детских кресел для реабилитации и приносит безопасность и гибкость в повседневную жизнь семей".





Уже более 30 лет компания Thomashilfen поставяет автокресла для детей с особыми потребностями. Сегодня мы также используем наши ноу-хау для разработки собственных автокресел для детей и взрослых. В них вложен весь наш многолетний опыт работы с потребностями пользователей и их родственников.

Gunnar Tomas, владелец

Pioneer

REHAB CAR SEATS

since 1988

Компания Thomashilfen располагает самым большим ассортиментом автокресел для реабилитации в мире и предлагает необходимую поддержку для людей всех возрастов и с ограниченными возможностями.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Axkid ONE 3 Reha

- Технология раздвижных сидений, обеспечивающая лучшее пространство для ног на рынке
- Программа безопасности на большие расстояния: требуется только одно детское автокресло, обращённое назад
- Гарантия установки за 30 секунд
- Усовершенствованная система для хорошего сна с функцией плавного наклона

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

включительно:

- Блок отведения
- Направляющие для ног
- Подушка под голову
- Накладки на багажник

ТЕХНОЛОГИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ СИЛЫ

Геометрия подголовника, а также выбор материала специально разработаны для поглощения силы удара до того, как она достигнет ребенка.

Подголовник регулируется и может быть установлен в 12 положениях, что позволяет полностью удовлетворить потребности в высоте и комфорте.

ЗАЩИТА ОТ БОКОВОГО УДАРА ASIP

Сверхустойчивые поглотители энергии по бокам значительно снижают силу бокового удара.

5-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ

Встроенный 5-точечный ремень с центральным регулятором для быстрой регулировки длины ремня. Практичный соединитель ремня предотвращает перекручивание ремней. Быстрое крепление без ремня безопасности транспортного средства.

ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Для поддержки улучшенной осанки можно использовать боковые накладки на туловище (1) и направляющие накладки для ног (2) отрегулированы в соответствии с размерами вашего ребёнка.

ОБЗОР

Система Easy Installation System включает 6 интуитивно понятных шагов. Ребордер также оснащён автоматическим отбойником со встроенным звуковым сигналом, который подскажет, когда сиденье достигнет оптимального положения.

Отображение базы:

- зеленый: установлен правильно
- красный: установлен неправильно

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ

Благодаря уникальной системе регулировки пространства для ног, кресло можно установить в диапазоне от ультракомпактного положения, требующего всего 73 см пространства, до 88 см с максимальным пространством для ног. Стоит отметить, что большинству детей такое пространство для ног никогда не понадобится, поэтому и само кресло будет нуждаться в нём редко. Феноменальная особенность этого кресла заключается в его абсолютной гибкости, позволяющей ему подходить для любой семейной компоновки и любого автомобиля, независимо от размера салона, одним нажатием кнопки.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЛАНКА ОТСКОК

Облегчает установку и обеспечивает надёжную фиксацию автокресла. Обеспечивает надёжную фиксацию автокресла в случае любого типа аварии, включая опрокидывание.

Помимо безопасности, автоматический отбойный брус обеспечивает дополнительное пространство для ног и позволяет легко установить его менее чем за 30 секунд.

СИСТЕМА ХОРОШЕГО СНА

Бесступенчатая регулировка наклона сиденья до 42 градусов позволяет быстро привести его в положение для отдыха или сна.



Максимальная безопасность – увеличенная высота заднего хода до 125 см

Положение «лицом назад» помогает снизить нагрузку на позвоночник при лобовом столкновении, когда голова ребёнка резко запрокидывается вперёд. Энергопоглощающая технология подголовника защищает чувствительную голову и шею ребёнка в случае удара.

Когда ребенок сидит в автокресле, риск получения им серьезных травм снижается на 92%.



**Быстро и безопасно
Установка 30 секунд.**



Посмотрите видео:
Как установить
Axkid ONE 3 Reha в машине

