



76- 135 см  
до 36 кг



# AVOVA

## Sperling Reha

Максимальная безопасность благодаря регулируемому 5-точечному  
ремню и простой установки ISOFIX –  
идеально адаптирован к каждому этапу роста ребёнка

# AVOVA Sperling Reha



Система AVOVA Sperling Reha позволяет использовать ремень безопасности и фиксирующий ремень в одном устройстве на расстоянии от 76 см до 135 см без переоборудования. Для обеспечения постоянной безопасности и комфорта. Простота в обращении с первых прогулок и до школьного возраста - это всегда правильная поддержка и защита для ребенка.



Компания Thomashilfen поставляет реабилитационные автокресла для детей с особыми потребностями уже более 35 лет. Сегодня мы также используем свой опыт для разработки собственных реабилитационных автокресел. Они воплощают в себе весь наш многолетний опыт удовлетворения потребностей детей и родителей.

  
Гуннар Томас, владелец

Пионер

**РЭЧАБ САР ЮВТС**

с  
1988

*Thomashilfen предлагает самый большой в мире  
ассортимент реабилитационных автокресел и  
обеспечивает правильную поддержку для всех возрастов и  
с любыми ограниченными возможностями.*

## Особенности AVOVA Sperling Reha:

- **Простота в обращении:** блокировка ограничителя высоты подголовника указывает, когда пора переключить ремень безопасности на ремень позиционирования, исключая ошибки при эксплуатации
- **Точная регулировка колодок:** для поддержки правильной осанки верхней части тела ребёнка
- **Гибкость благодаря аксессуарам:** широкий спектр возможностей регулировки, которые обеспечивают оптимальное выравнивание и удобные положения для отдыха в полулежачем положении



**Рост 76 см - 100 см**

5-точечный ремень, ISOFIX и якорный ремень (Top Tether)



**Рост 100 см - 135 см**

3-х точечный ремень, ISOFIX, опционально 5-точечный ремень

ОСНОВНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ВКЛЮЧАЕТ



## ДОП. ОПЦИИ

ОСНОВНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ПОВОРОТНОЕ ОСНОВАНИЕ и НАКЛОННОЕ

ОСНОВАНИЕ при необходимости можно дополнить широким ассортиментом аксессуаров.

Для удобства использования рычаг разблокировки расположен сбоку поворотного основания.



### ЗАПИРАЕМАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПЛЕЧЕЙ

Это позволяет удерживать ремень на месте, подогнав его под размер ребенка.

### БОКОВЫЕ КРЫЛЬЯ

Глубокие и мягкие боковые валики не только обеспечивают комфорт, но и играют решающую роль в защите от боковых ударов, поглощая нагрузку и защищая ребенка.

Просто переместив плечевые накладки, 5-точечный ремень может быть преобразован из ремня безопасности в фиксирующий ремень. Регулировка высоты подголовника сигнализирует об оптимальном времени для смены.



### 5-ТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГУЛИРУЕТСЯ ОДНОЙ РУКОЙ

Центральный регулятор позволяет быстро и легко подстроиться под потребности растущего ребенка.

## БЕЗОПАСНЫЙ ПОДГОЛОВНИК

Эргономичный подголовник с 9-позиционной регулировкой высоты обеспечивает оптимальную защиту чувствительной области головы и шеи ребёнка.



## Защита от бокового удара ISIP

Интеллектуальная интегрированная в сиденье технология безопасности эффективно снижает силу бокового удара.



## ТОЧНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ

Для поддержки правильного положения верхней части тела боковые опоры туловища (1) и боковые обивки сидений (2) можно адаптировать к особенностям ребёнка.

## 3-ступенчатая регулировка наклона сиденья в пространстве

Комфортное положение для отдыха и сна. Облегчает положение, когда ребёнку слишком тяжело сидеть прямо.

## ДУХСТОРОННЕЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

(дополнительное крепление с помощью верхнего ремня безопасности при росте до 100 см)

- Быстрая и простая установка
- Простота использования и запираемость
- Дополнительная устойчивость и безопасность



Original <b>Sperling X</b> i-Size Universal ISOFIX 76cm-100cm/18kg
i-Size Booster seat 100cm-135cm
Specific Vehicle Booster Seat 100cm-150cm
UNECE-Regulation NO. 129/03
 030031
<b>AVOVA GmbH</b> Blaubeurer Straße 71 89077 Ulm Germany
<b>AVOVA Sperling Reha</b> <b>S</b> Proof of strength by crash test in accordance to ECE R129/03
 Thomashilfen Walkmühlenstraße 1 27432 Bremervörde Germany

**GMFCS**

Уровень  
III-V

# AVOVA Sperling Reha

## ▶ Функции (выбор)



### БОКОВАЯ ПОДДЕРЖКИ

#### ТУЛОВИЩА

являются важной опорой для верхней части тела, боковые подушки сиденья поддерживают бедра.



### 5-ТОЧЕЧНАЯ ФИКСАЦИЯ

сохраняет верхнюю часть тела в правильном положении.

Небольшая накладка на пах закрывает пряжку ремня, предотвращая её нежелательное расстёгивание.



### ПОДГОЛОВНИК

можно утеплить с помощью внутренних карманов




### СЪЁМНЫЙ АБДУКТОР

для правильного положения сидья, предотвращает заваливание ног



## ▶ АКСЕССУАРЫ – индивидуальные, удобные и растущий вместе с вами

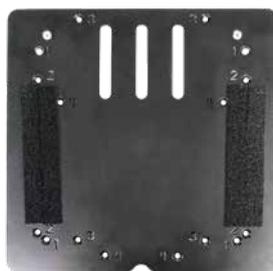

**ПЛАСТИНА-АДАПТЕР - ВСЕГДА требуется для следующих аксессуаров**



Адаптер для подставки для ног БЕЗ SEATFIX



Стабилизация спереди гарантирует стабильное положение сиденья в автомобиле



Подставка для ног обеспечивает устойчивое положение сидья

## ▶ АКСЕССУАРЫ

### ВЫСОТА ДО ТЕЛА

100 см

**ПРИМЕЧАНИЕ:** AVOVA Sperling Rehab нельзя использовать с наклонно-поворотными устройствами.



## ▶ АКСЕССУАРЫ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ  
КОМБИНАЦИЯ  
**ВЫСОТА ОТ ТЕЛА  
100 CM**

**ПЛАСТИНА-АДАПТЕР -  
ВСЕГДА** требуется для  
следующих аксессуаров



Адаптер для подставки для ног с  
ИЛИ БЕЗ SEATFIX



### ПОВОРОТНОЕ ОСНОВАНИЕ

облегчает передачу, можно  
заказать с правым и левым  
поворотом



### НАКЛОННОЕ ОСНОВАНИЕ

позволяет наклонять сиденье  
в 4 шага (2,5°/5°/7,5°/10°) для  
расслабленного полулежачего  
положения



### НАКЛОННОЕ ОСНОВАНИЕ И ПОВОРОТНОЕ ОСНОВАНИЕ

объединены для наилучшей  
управляемости и комфорта



Подставка для ног  
обеспечивает устойчивое  
положение сиденья



Подставка, адаптер для  
крепления сиденья  
или зажимная дуга гарантирует  
стабильное положение сиденья  
в автомобиле

### AVOVA Sperling Rehab с новыми высокотехнологичными аксессуарами

Уникальное сочетание поворотного и  
наклонного основания можно комбинировать  
с широким спектром аксессуаров.

## Аксессуары



### ФИКСИРУЮЩИЙ ЖЕЛЕТ

предотвращает выпадение ребёнка из 5-точечный ремень



### ПОДУШКА

защищает сиденье и обеспечивает большую устойчивость



### СТОЛ

способствует развитию ребёнка, прямой и устойчивой осанки, обеспечивает ребёнку всестороннюю поддержку и безопасность



### ПАХОВАЯ НАКЛАДКА (большая)

защищает чувствительный животик ребёнка, КЛИН ДЛЯ СИДЕНЬЯ (ниже) позволяет + 10° наклон сиденья

### Размеры и вес AVOVA Spierling Reha

Глубина сиденья (к паховому ремню)	16 см (21 см)
Глубина сиденья (к переднему краю)	35 см
Ширина сиденья	26 см - 37 см
Высота спинки (сидите внутри)	76 см
Высота плеча	30–51 см
Наклон сиденья (базовая модель)	10°
Наклон сиденья (с наклонной пластиной):	2,5° / 5° / 7,5° / 10°
Габаритные размеры (дхшхв):	43 x 63 x 47 см
Вес сиденья	13 кг
Рост пользователя	76–135 см
Максимальный вес пользователя	36 кг

\* 3-точечный ремень безопасности необходимо использовать при росте от 100 см.

### Основное оборудование:

Сиденье и спинка со встроенным подголовником, регулируемым по высоте в 9 положениях, подголовник с карманом; вкл. интегрированные крепления Isofix; встроенная регулировка спинки; защита от боковых ударов благодаря встроенным энергопоглощающим элементам; съёмные боковины багажника и сиденья; 5-точечные ремни безопасности; наплечники; небольшая накладка на пах; съёмный абдукционный блок; съёмные чехлы.

Полный обзор аксессуаров вы можете найти в форме заказа в Интернете: [www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)

Посмотрите видео:

Как установить кресло AVOVA Spierling Reha с креплением Seatfix в автомобиле



Член Международной ассоциации поддержки реабилитации детей и молодежи (eV)



[www.kinderreha24.de](http://www.kinderreha24.de)

Реабилитационные автокресла от Thomashilfen: верное решение для любой поездки!



Reboarder Axxid ONE 2 Reha

61 - 125 см



Axxid NEXTKID Reha

100 - 150 см



Геркулес Малый

100 - 150 см



Геркулес Прайм

130 - 180 см

Весь ассортимент реабилитационных автокресел вы найдете на сайте [www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)



Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Германия  
Телефон: +49 (0)4761 886-63 или -68 · Факс: +49 (0)4761 886-19 · [www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)